

PEARL

Guía de configuración



LifeStation[®]
MEDICAL ALERT SYSTEMS

Qué hay en la caja




Pearl



Cargador




Cordón

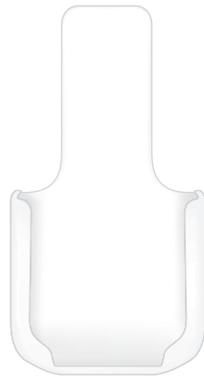

Broche para cinturón
(Opcional)

Conozca su Pearl

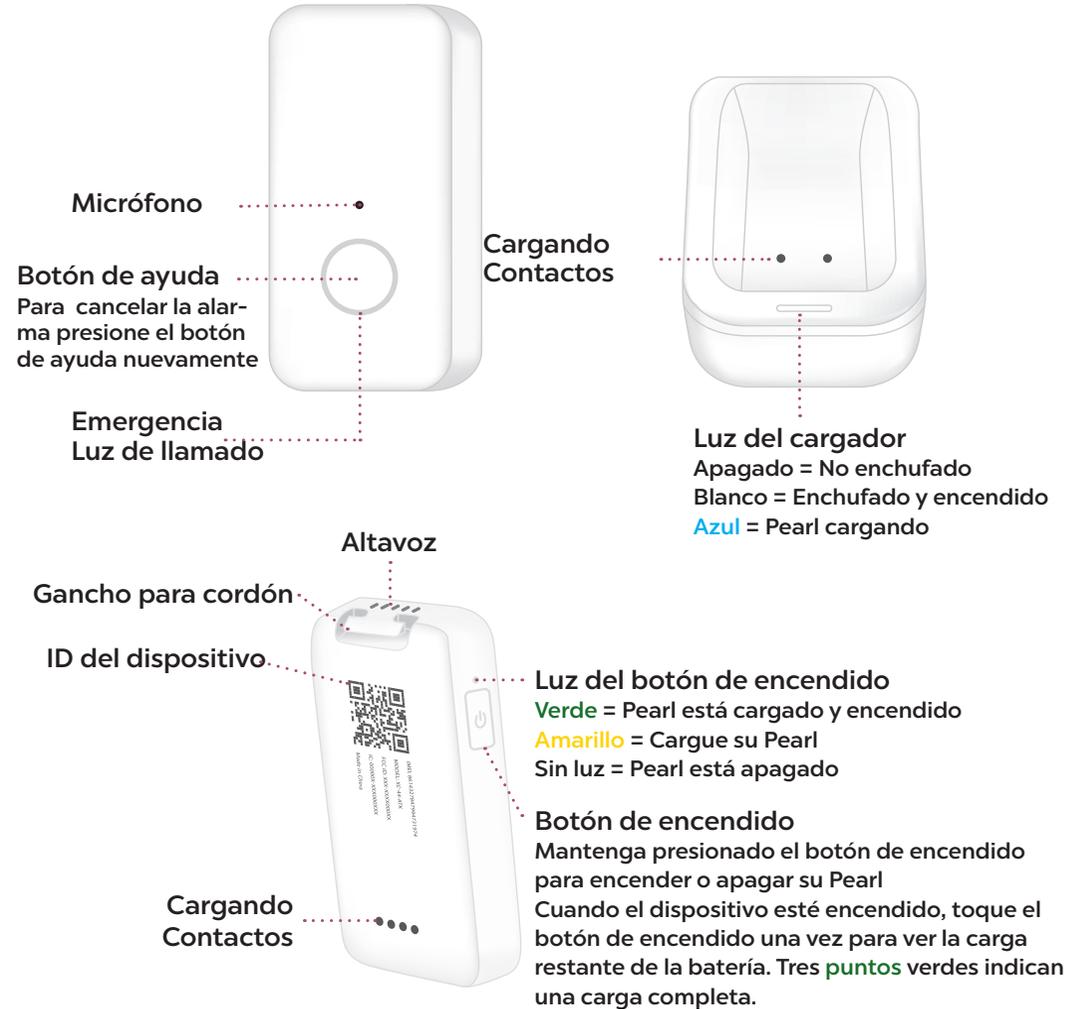

Preguntas frecuentes

1. ¿Con qué frecuencia debo cargar mi Pearl?

Para obtener mejores resultados, debe cargar completamente su Pearl a diario.



Cargar diariamente

2. ¿Es mi Pearl resistente al agua?

Su Pearl es resistente al agua IP76 y se puede usar en la ducha pero no debe sumergirse en el agua.



Resistente al agua



No sumergir

3. ¿Dónde funciona mi Pearl?

Su Pearl funcionará tanto dentro como fuera de su casa, siempre que haya cobertura de telefonía móvil.



Dentro de su casa



Fuera de su casa

4. ¿Con qué frecuencia debo probar mi Pearl?

Debe probar su Pearl mensualmente. Para probar su Pearl, mantenga presionado el botón de ayuda hasta que escuche el mensaje de alerta de emergencia. Cuando se conecte al centro de monitoreo, indique que simplemente está probando su Pearl.



Probar mensualmente

Configuración de su Pearl

1. Conecte el cargador. La luz del cargador se encenderá en blanco.

2. Coloque su Pearl en el cargador como se muestra a continuación.

Cuando se cargue correctamente, la luz del cargador se encenderá **en azul** y su Pearl anunciará "Cargando".

Las luces del estado de la batería se encenderán **en verde** mientras se esté cargando. Su Pearl está completamente cargado cuando se visualizan **las tres** luces verdes. Su Pearl puede tardar hasta cuatro horas en cargarse por completo.

3. Pruebe su Pearl manteniendo presionado el botón de ayuda hasta que escuche el mensaje de alerta de emergencia. Cuando se conecte al centro de monitoreo, indique que solo está probando su dispositivo.



Para encender su Pearl:

Coloque su Pearl en el cargador o mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos. Cuando se encienda su Pearl, sentirá una vibración y escuchará "Encendiendo".

Para apagar su Pearl:

Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos. Su Pearl vibrará, la luz de encendido parpadeará y luego se apagará. **Asegúrese de apagar su Pearl antes de devolverlo.**

En caso de emergencia

Si necesita ayuda, mantenga presionado el botón de ayuda hasta que escuche el mensaje de alerta de emergencia.

Se le pondrá en contacto con un especialista en cuidados que estará a su disposición para ayudarle. Su Pearl funcionará en interiores o exteriores, siempre que haya cobertura de telefonía móvil.

Cómo cancelar una activación accidental

Para cancelar una alarma, presione el botón de ayuda nuevamente. Si está conectado y el centro de monitoreo le pregunta si necesita ayuda, diga claramente "No". Se le pedirá que confirme que no necesita ayuda.



Detección de caídas (opcional)

Para dispositivos con la función de detección de caídas habilitada, si se detecta una caída y no puede presionar el botón de ayuda, el dispositivo envía una alerta de caída de emergencia a un especialista de cuidados.

Para obtener mejores resultados, lleve su Pearl en el cordón y fuera de toda tu ropa.

La función de detección de caídas no detecta el 100% de las caídas. De ser posible, los usuarios siempre deben presionar su botón cuando necesitan ayuda.

Cómo llevar su Pearl

Lleve su Pearl como un collar

- Su Pearl vendrá listo para usar con el cordón adjunto. Si se quita el cordón, puede volver a engancharlo fácilmente abrochándolo alrededor del gancho situado en la parte superior de su Pearl. El cordón es ajustable para su comodidad y tiene un cierre de seguridad.



Tenga en cuenta que si tiene la función de detección de caídas, le recomendamos que use su Pearl alrededor de su cuello.

Uso del broche del cinturón opcional

- Si su paquete incluye el broche del cinturón adicional, sostenga el broche del cinturón en una mano y el dispositivo en la otra mano. Coloque su Pearl en el broche y empújelo hasta que sienta un clic.



Gracias por unirse a la
familia de LifeStation

LifeStation[®]
MEDICAL ALERT SYSTEMS

Atención al cliente
800-998-2400



Escanee aquí para obtener esta guía en
español, mandarín, ruso y más



Este dispositivo depende de la cobertura de telefonía móvil para funcionar.
Si la cobertura de telefonía móvil es limitada, es posible que las prestaciones del dispositivo se vean reducidas.

www.LifeStation.com