


PEARL

Руководство по настройке



LifeStation[®]
MEDICAL ALERT SYSTEMS

Комплект поставки

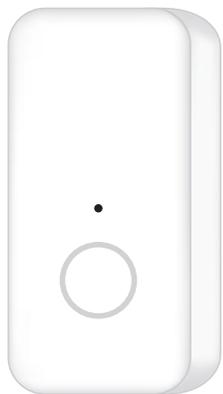


Pearl



Зарядное устройство




Шнурок

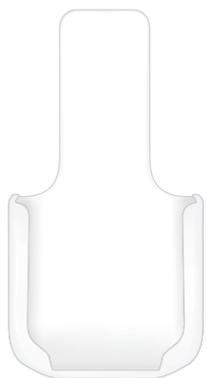

Зажим для ремня
(опция)

Познакомьтесь со своим устройством Pearl

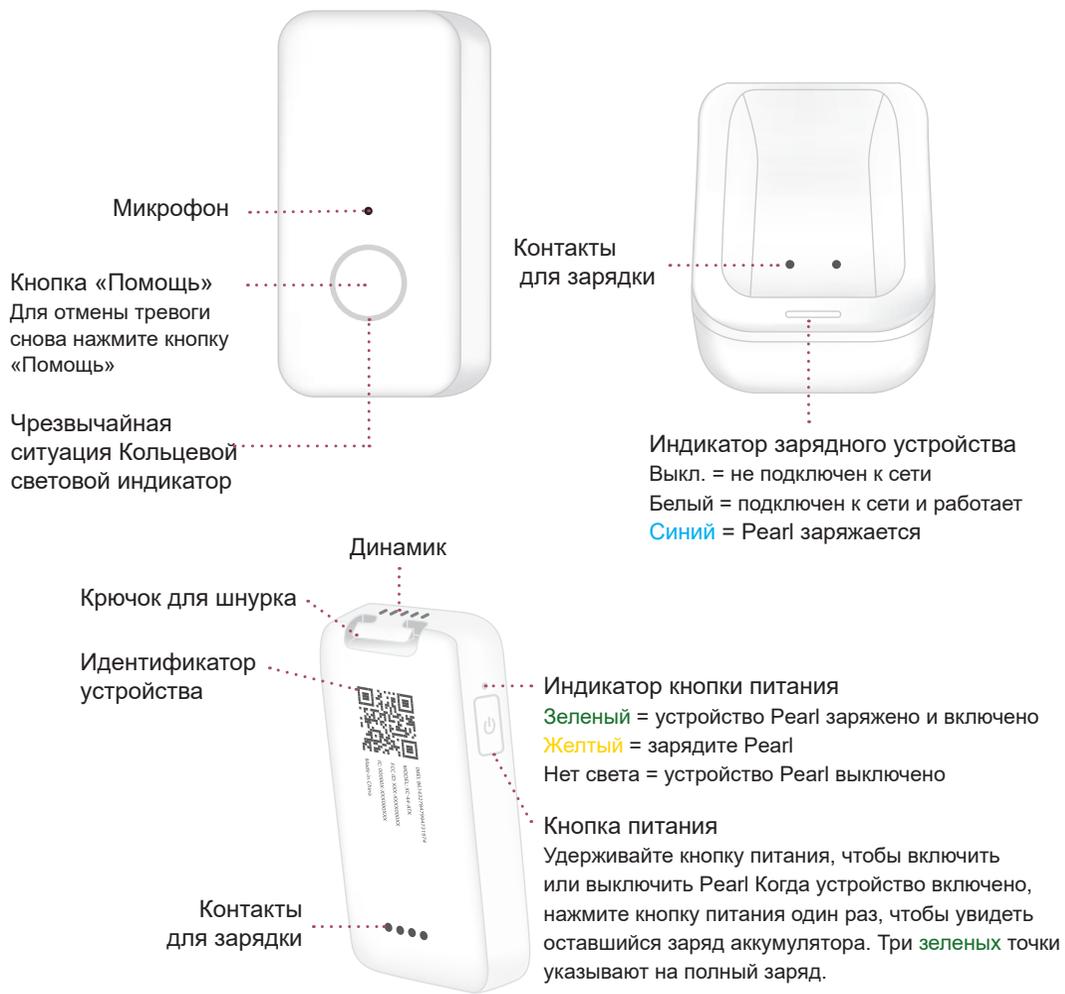

1. Как часто следует заряжать Pearl?
Для наилучших результатов следует полностью заряжать Pearl ежедневно.



Заряжайте
каждый день

2. Является ли мое устройство Pearl водонепроницаемым?
Стандарт влагозащитности Pearl — IP76. Это значит, что Pearl можно не снимать в душе, но не следует погружать в воду.



Влагозащитное
устройство



Не погружать
в воду

3. Где работает мое устройство Pearl?
Pearl будет работать как в вашем доме, так и на улице в местах, где есть сотовая связь.



Дома



На улице

4. Как часто следует проверять Pearl?
Pearl нужно проверять ежемесячно. Для проверки Pearl нажмите и удерживайте кнопку «Помощь», пока не услышите тревожное сообщение о чрезвычайной ситуации. После подключения к Контрольному центру сообщите, что вы просто тестируете Pearl.



Проверяйте
ежемесячно

1. Подключите зарядное устройство. Индикатор зарядного устройства загорится белым светом.
2. Поместите Pearl на зарядное устройство, как показано ниже.

При правильной зарядке индикатор зарядного устройства загорится **СИНИМ СВЕТОМ** и Pearl выдаст голосовое сообщение «Зарядка».

В процессе зарядки индикаторы состояния батареи поочередно загораются **ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ**. Ваш Pearl полностью заряжен, когда все три индикатора горят **ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ**. Полная зарядка вашего Pearl занимает до четырех часов.

3. Проверьте Pearl, нажав и удерживая кнопку «Помощь», пока не услышите тревожное сообщение о чрезвычайной ситуации. После подключения к Контрольному центру сообщите, что вы просто тестируете устройство.



ВКЛЮЧЕНИЕ питания Pearl:

Поместите Pearl в зарядное устройство или нажмите и удерживайте кнопку питания для три секунды. Когда Pearl включится, вы почувствуете вибрацию и услышите голосовое сообщение «Включение».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ Pearl:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Pearl завибрирует, индикатор питания мигнет, а затем погаснет. **Перед возвратом Pearl обязательно выключите его.**

В чрезвычайных ситуациях

Если вам нужна помощь, нажмите и удерживайте кнопку «Помощь», пока не услышите тревожное сообщение о чрезвычайной ситуации.

Вас соединят со специалистом поддержки для оказания вам помощи. Ваше устройство Pearl будет работать как в помещениях, так и на улице, везде, где есть сотовая связь.

Отмена при непреднамеренном включении

Для отмены тревоги снова нажмите кнопку «Помощь». Если вы подключились к Контрольному центру и у вас спрашивают, нужна ли вам помощь, четко скажите: «Нет». Вас попросят подтвердить, что помощь не требуется.



Обнаружение падения (опция)

Устройства с включенной функцией обнаружения падения: если зафиксировано падение и вы не можете нажать кнопку «Помощь», устройство отправляет экстренное оповещение о падении специалисту поддержки.

Для наилучшего обнаружения падения носите Pearl на шнурке поверх всей одежды.

Функция обнаружения падения не может обнаружить абсолютно все падения. Если пользователи могут нажать на кнопку, когда им нужна помощь, им следует сделать это.

Как носить Pearl

Носите Pearl так же, как носите ожерелье

- Устройство Pearl готово к использованию с прикрепленным шнурком. Если вы сняли шнурок, его можно легко прикрепить снова, сделав петлю вокруг крючка в верхней части Pearl. Шнурок регулируется для комфорта и имеет разъемную застежку.



Обратите внимание, что если у вас включена функция обнаружения падения, мы рекомендуем носить Pearl на шее.

Использование дополнительного зажима для ремня

- Если в комплект поставки входит дополнительный зажим для ремня, возьмите его в одну руку, а устройство в другую руку. Поместите Pearl в зажим и вставьте до щелчка.



Спасибо, что стали членами
семьи LifeStation

LifeStation[®]
MEDICAL ALERT SYSTEMS

Поддержка клиентов
800-998-2400



Отсканируйте здесь для просмотра этого руководства
на испанском, китайском, русском и других языках.



Работа этого устройства зависит от наличия доступа к сотовой связи.
Если покрытие сотовая связь плохая, работа функций устройства может ухудшиться.

www.LifeStation.com