




તમાણું સહાય બટન
રસિટબેન્ડ અથવા નેકલેસ
તરીકે પહેરી શકાય છે.

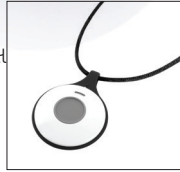

અમે અહીં મદદ કરવા માટે
આવ્યા છીએ.
કોલ (800) 232-1700
સહાય માટે.


મહત્વનું
જ્યાં નોંધવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સેવા સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરો
અને તેને તમારા કોમ્યુનિટી મેનેજરને પરત કરી દો.

શરૂ કરી રહ્યા છીએ

- ▶ તમારી સિસ્ટમ ટેગદાખલ કરવા માટે સુયોજિત કરવા માટે અંદરના પગલાંઓને અનુસરો.
- ▶ તમારા ખાતાની **માહિતી ફોર્મની સમીક્ષા કરો** અને જો તમારે કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર હોય તો અમારો સંપર્ક કરો.
- ▶ જ્યાં નોંધ્યું હોય ત્યાં **સેવા કરાર** સહી કરો અને તેને તમારા કોમ્યુનિટી મેનેજરને પરત કરી દો.

શરૂ કરવા માટે આ સરળ પગલાંઓનું પાલન કરો

સ્થાન શોધો

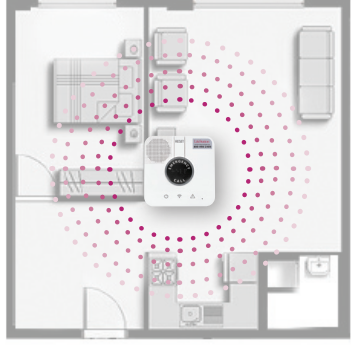


તમારા ઉપકરણને **સારા સેલ્યુલર** રસિંપ્શન સાથે કેન્દ્રિય સ્થાન પર મૂકો

તેને પ્લગ કરો



હંમેશા યાલુ હોય તેવું આઉટલેટ શોધો **સ્વીચ અથવા ટાઈમર દ્વારા** અને નયિંત્રતિ ન હોય તેવું ટેગદાખલ કરો

તેને ચાલુ કરો

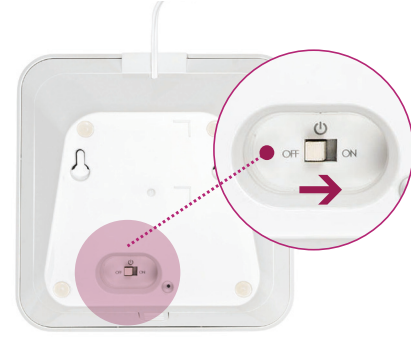

કન્સોલના તળિયે **ચાલુ/બંધ** સ્વીચને "ચાલુ" સ્થાન પર સ્લાઇડ કરો

તેને જોડાવા દો



કન્સોલને **સેલ્યુલર નેટવર્કથી** કનેક્ટ થવા માટે 2 મિનિટિ સુધીનો સમય આપો

તેનો ટેસ્ટ કરો



કોલ કરો **844-303-3443** અને પછી **તમારું સહાય બટન દબાવો**

તમારા કન્સોલને જાણો

પાવર



સ્થિર ચાલુ

પાવર જોડાયેલ છે

બ્લન્કિંગ

સસિંટમને પ્લગ થયેલ નથી

લાઇટ બંધ

સસિંટમ પાસે પાવર નથી

સેલ્યુલર સેવા



સ્થિર ચાલુ

સેલ્યુલર સેવા ઉપલબ્ધ

અથવા બ્લન્કિંગ



સ્થિર ચાલુ

કન્સોલને તેના વસિંતારમાં ખસેડો

અથવા ઝબકવું

વધુ સારું સેલ્યુલર કવરેજ

સસિંટમ



સ્થિર ચાલુ

ગ્રાહક સેવા પર કોલ કરો

અથવા બ્લન્કિંગ કરો

કટોકટી



બ્લન્કિંગ

મેડિકલ એલાર્મ પ્રક્રિયામાં છે

પૂરશ્નો? કોલ (800) 232-1700