



आप अपने हेल्प बटन को रसिंबैंड या नेकलेस के रूप में पहन सकते हैं।



हम सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं।
(800) 232-1700 पर कॉल करें सहायता के लिए।

महत्वपूर्ण
जहां बताया गया है वहाँ सर्विस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें और उसे अपने कम्युनिटी मैनेजर को लौटा दें।


शुरूआत करना

- ▶ अपना सिस्टम सेटअप करने के लिए अंदर दिए गए चरणों का पालन करें।
- ▶ अपने **अकाउंट इनफॉर्मेशन फॉर्म की समीक्षा करें** और यदि आपको कोई परिवर्तन करना हो तो हमें कॉल करें।
- ▶ जहां बताया गया है वहाँ **सर्विस अग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर करें और उसे अपने कम्युनिटी मैनेजर को लौटा दें।



शुरू करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें

एक लोकेशन खोजें

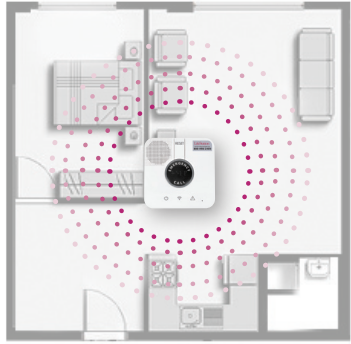


अपने डवाइस को एक ऐसे **केंद्र स्थान** पर रखें जहाँ **सेलुलर रसिप्शन अच्छा हो**

प्लग में लगाएं



एक ऐसा आउटलेट खोजें जो **हमेशा चालू रहे** और किसी **स्वचि या टाइमर द्वारा नयंत्रित नहीं किया जाता हो**

इसे चालू करें

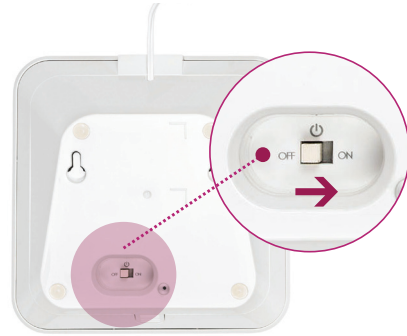

कंसोल के नचिले भाग पर ऑन/ऑफ स्वचि को स्लाइड करके "ऑन" स्थिति पर लाएं

इसे कनेक्ट होने दें



कंसोल को सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए 2 मिनट तक का समय दें

इसकी जाँच करें



844-303-3443 पर कॉल करें और इसके बाद अपना हेल्प बटन दबाएँ

अपने कंसोल को जानें

पावर



स्टेडी ऑन

पावर कनेक्टेड

ब्लकिंग

सिस्टम अनप्लग्ड है

लाइट ऑफ़

सिस्टम में कोई पावर नहीं है

सेलुलर सर्विस



स्टेडी ऑन या ब्लकिंग

सेलुलर सर्विस उपलब्ध है



स्टेडी ऑन या ब्लकिंग

कंसोल को बेहतर सेलुलर कवरेज वाले क्षेत्र में ले जाएं

सिस्टम



स्टेडी ऑन या ब्लकिंग

ग्राहक सेवा को कॉल करें

इमरजेंसी



ब्लकिंग

मेडिकल अलार्म जारी है

क्या आपके कोई सवाल हैं? **(800) 232-1700 पर कॉल करें**