



Il tuo pulsante di emergenza può essere indossato come un braccialetto o collana.



Siamo qui per aiutarti.
Chiama il numero
(800) 232-1700
per ricevere assistenza.

IMPORTANTE

Firma il Contratto di servizio dove indicato e restituiscilo al tuo community manager.


Per iniziare

- ▶ Segui i passaggi che trovi all'interno per configurare il tuo sistema.
- ▶ Rivedi il **Modulo delle informazioni del tuo account** e chiamaci se hai bisogno di apportare modifiche.
- ▶ Firma il **Contratto di servizio** dove indicato e restituiscilo al tuo community manager.



SEGUI QUESTI SEMPLICI PASSAGGI PER INIZIARE

Trova una posizione

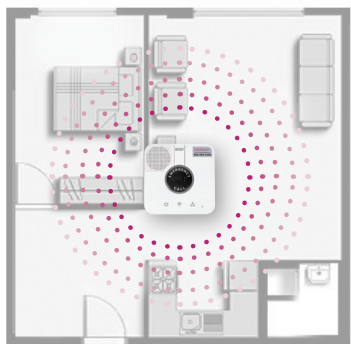


Posiziona il tuo dispositivo in una **posizione centrale** dove è presente **una buona ricezione**

Collegalo



Individua una presa **sempre attiva** e **non controllata da un interruttore o un timer**

Accendilo

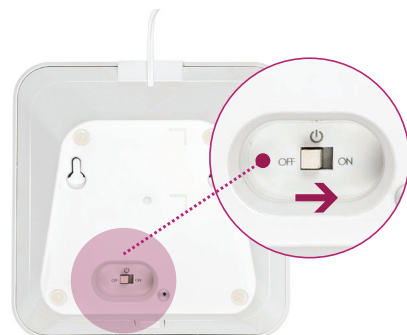

Posiziona **l'interruttore On/Off** situato nella parte finale **su "ON"**

Fallo connettere



Attendi fino a **2 minuti** affinché la console si connetta alla rete cellulare

Provalo



Chiama **il numero di telefono: 844-303-3443** poi **premi il tuo pulsante di emergenza**

SCOPRI COME FUNZIONA

L'ALIMENTAZIONE DELLA TUA CONSOLE



LUCE FISSA	L'alimentazione è collegata
LAMPEGGIANTE	Il sistema è scollegato
LUCE SPENTA	Il sistema non ha alimentazione

SERVIZIO CELLULARE



FISSA O LAMPEGGIANTE	Servizio cellulare disponibile
-----------------------------	--------------------------------



FISSA O LAMPEGGIANTE	Sposta la console nell'area con una migliore copertura cellulare
-----------------------------	--

SISTEMA



FISSA O LAMPEGGIANTE	Chiama il servizio clienti
-----------------------------	----------------------------

EMERGENZA



LAMPEGGIANTE	Allarme medico in corso
---------------------	-------------------------

Hai domande? **Chiama il numero (800) 232-1700**