



지원 버튼은 손목 밴드나 목걸이로 착용할 수 있습니다.



저희가 도와드리겠습니다.
(800) 232-1700번으로
전화하여 도움을
받으십시오.

중요 사항
명시된 서비스 계약서에 서명하고
커뮤니티 관리자에게 반환하십시오.


시작하기

- ▶ 내부 단계에 따라 시스템을 설정하십시오.
- ▶ 귀하의 **계정 정보 양식** 을 검토하고 변경해야 하는 사항이 있으면 저희에게 연락해 주십시오.
- ▶ 명시된 **서비스 계약서**에 서명하고 커뮤니티 관리자에게 반환하십시오.



다음과 같이 간단한 단계를 따라 시작하십시오

위치 찾기

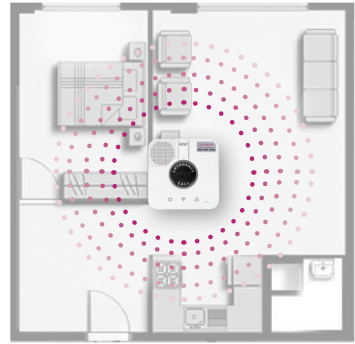


무선 통신 수신이 양호한
중앙 위치에 장치를
배치하십시오

플러그 꽂기



항상 **켜져**
있고 스위치나 타이머로
제어되지 않는 콘센트를
찾으십시오

전원 켜기

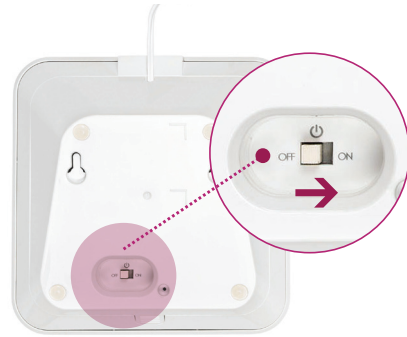

콘솔 하단에 있는 **켜기/끄기**
스위치를
“ON(켜기)” 위치로
밀어주십시오

연결하기



콘솔이 무선 통신
네트워크에 연결되는 데
최대 **2분**이
걸립니다

테스트하기



844-303-3443번으로
전화한 다음 **지원 버튼을**
누르십시오

콘솔에 대해 알아보기

전원



계속 켜져 있음	전원이 연결됨
깜박임	플러그가 뽑힘
조명이 꺼짐	시스템의 전원이 꺼짐

무선 통신 서비스



계속 켜져 있음	무선 통신 서비스 이용 가능
또는 깜박임	



계속 켜져 있음	콘솔을 무선 통신 서비스가
또는 깜박임	더 잘 되는 영역으로 옮기십시오

시스템



계속 켜져 있음	고객 서비스 연락
또는 깜박임	

비상상황



깜박임	진행 중인 의료 경보
-----	-------------

질문이 있으십니까? (800) 232-1700번으로 전화하십시오