



O seu botão de ajuda pode ser utilizado como uma pulseira ou um colar.



Estamos aqui para ajudar
Ligue para (800) 232-1700
para obter ajuda.

IMPORTANTE

Assine o Contrato de Prestação de Serviços onde indicado e devolva-o ao seu gestor de comunidade.


Começar a utilizar

- ▶ Siga os passos indicados para configurar o seu sistema.
- ▶ Reveja o seu **Formulário de Informações da Conta** e contacte-nos se precisar de fazer alguma alteração.
- ▶ Assine o **Contrato de Prestação de Serviços** onde indicado e devolva-o ao seu gestor de comunidade.



SIGA ESTES PASSOS SIMPLES PARA COMEÇAR

Encontre um local

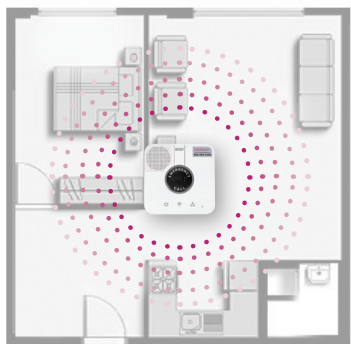


Coloque o seu dispositivo num **local central** com **boa receção de rede móvel**

Ligue-o à tomada



Encontre uma tomada que esteja **sempre ligada** e **não seja controlada por um interruptor ou temporizador**

Ligue o dispositivo

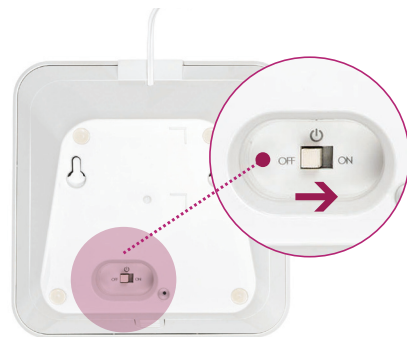

Deslize o **interruptor On/Off** on na parte inferior da consola para a **posição "ON"**

Deixe-o ligar-se



Aguarde até **2 minutos** para que a consola se ligue à rede móvel

Teste-o



Ligue para **844-303-3443** e depois **prima o seu botão de ajuda**

CONHEÇA A SUA CONSOLA

ALIMENTAÇÃO



LUZ SEMPRE LIGADA Ligado à alimentação

LUZ A PISCAR O sistema está desligado

LUZ DESLIGADA O sistema não tem alimentação elétrica

SERVIÇO DE REDE MÓVEL



LUZ SEMPRE LIGADA OU LUZ A PISCAR Serviço de rede móvel disponível



LUZ SEMPRE LIGADA OU LUZ A PISCAR Desloque a consola para uma área com melhor cobertura de rede móvel

SISTEMA



LUZ SEMPRE LIGADA OU LUZ A PISCAR Contacte o serviço de apoio ao cliente

EMERGÊNCIA



LUZ A PISCAR Alarme médico em curso

Tem alguma pergunta? **Ligue para (800) 232-1700**