



Nút trợ giúp có thể được đeo như vòng tay hoặc vòng cổ.



Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Gọi (800) 232-1700 để được hỗ trợ.

QUAN TRỌNG

Ký Thỏa thuận dịch vụ tại nơi ghi chú và gửi lại cho người quản lý cộng đồng của bạn.


Hướng dẫn bắt đầu sử dụng

- ▶ Làm theo các bước trong hướng dẫn để thiết lập hệ thống.
- ▶ Xem lại **Biểu mẫu Thông tin tài khoản** của bạn và gọi cho chúng tôi nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- ▶ Ký **Thỏa thuận dịch vụ** tại nơi ghi chú và gửi lại cho người quản lý cộng đồng của bạn.



THỰC HIỆN NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU

Tìm vị trí

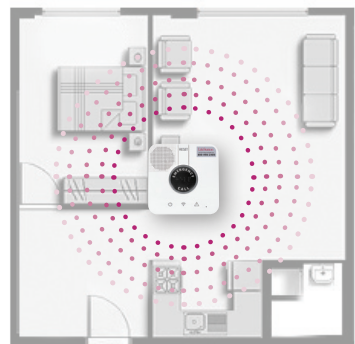


Đặt thiết bị của bạn vào vị trí trung tâm có thể thu sóng mạnh

Cắm nguồn



Tìm một ổ cắm **luôn hoạt động** và **không bị điều khiển bởi công tắc** hoặc bộ hẹn giờ

Bật thiết bị lên

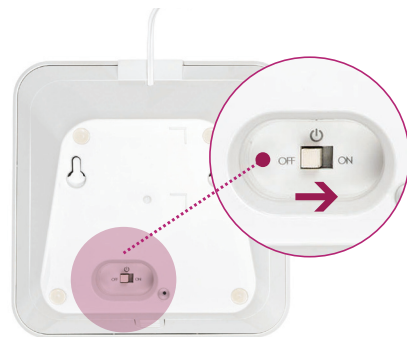

Gạt **công tắc Bật/Tắt** ở dưới đáy bộ điều khiển sang vị trí **“BẬT”**

Đợi thiết bị kết nối



Chờ trong **2 phút** để bộ điều khiển kết nối với mạng di động

Thử nghiệm



Gọi **844-303-3443** sau đó **nhấn nút trợ giúp**

HIỂU VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

NGUỒN



SÁNG LIÊN TỤC

Đã kết nối nguồn điện

NHẤP NHÁY

Hệ thống đã được rút phích cắm

ĐÈN TẮT

Hệ thống không có điện

DỊCH VỤ DI ĐỘNG



SÁNG LIÊN TỤC HOẶC NHẤP NHÁY

Có sẵn dịch vụ di động



SÁNG LIÊN TỤC HOẶC NHẤP NHÁY

Di chuyển bộ điều khiển đến khu vực có vùng phủ sóng di động tốt hơn

HỆ THỐNG



SÁNG LIÊN TỤC HOẶC NHẤP NHÁY

Gọi dịch vụ khách hàng

KHẨN CẤP



NHẤP NHÁY

Đang diễn ra Báo động y tế

Bạn có câu hỏi? Gọi (800) 232-1700