



您的帮助按钮
可以穿 腕带或
项链。



我们在此相助。
致电 (800) 232-1700
寻求帮助。

注意事项
签署服务协议
并将其返回给您的社区经理。


入门指南

- ▶ 按照里面的步骤设置您的系统。
- ▶ 审查您的**帐户信息表**，如果您需要进行任何更改，请致电我们。
- ▶ 在注明之处，签署**服务协议**并将其返回给您的社区经理。



按照以下简单步骤开始设置

找一个位置

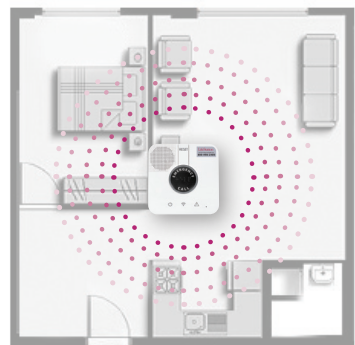


将您的设备放置在一个蜂窝网络信号接收良好的中心位置

插上电源



请找到一个**始终通电且不受开关或定时器控制的插座**。

打开开关

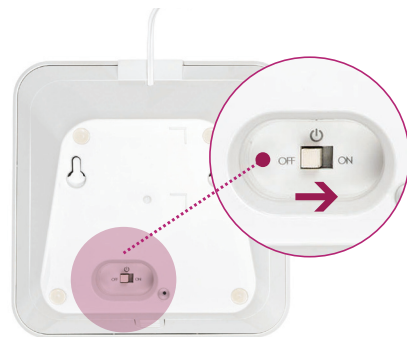

将控制台底部的**开关**滑动到“开”的位置。

使其连接上



请允许控制台最多**2分钟**时间连接到蜂窝网络。

测试一下



拨打**844-303-3443**然后按下您的求助按钮。

了解你的控制台

电源



持续亮起	电源已连接
闪烁	系统已拔下
指示灯熄灭	系统无电源

蜂窝网络服务



持续亮起或闪烁	提供蜂窝服务
---------	--------



持续亮起或闪烁	将控制台移至蜂窝网络覆盖较好的区域
---------	-------------------

系统



持续亮起或闪烁	致电客服
---------	------

紧急情况



闪烁	医疗警报正在处理中
----	-----------

有问题吗？致电 (800) 232-1700