

有問題？ CALL (800) 232-1700

SIDEKICK

開始使用
您的行動醫療警報裝置



為您的裝置充電

為了獲得最佳效果，請每晚為您的 Sidekick 充電



收到 Sidekick 後，請將其充電座插入電源插座。將 Sidekick 放置在充電座上，確保 SOS 求助按鈕朝前。確保您的 Sidekick 牢固地推入充電座以開始充電。正確充電時，充電座上的紅燈會亮起，且 Sidekick 會提示「正在充電」。

當 Sidekick 充滿電時，充電座上的紅燈會熄滅。



請確保充電座後方的電線已牢固安裝到位。

有問題？

CALL (800) 232-1700

了解您的裝置

按鈕



Sidekick可以在淋浴時佩戴，但不應浸入水中。



按
靜音按鈕兩次，
停用或啟用
語音警報。

有問題？

CALL (800) 232-1700

燈

測試您的設備



狀態燈：當Sidekick運行正常時，狀態燈會閃爍**綠燈**。

定位燈：當定位服務可用時，定位燈會閃爍**藍燈**。

電源燈
當電源燈閃爍**紅燈**時，您的Sidekick需要充電。



測試按鈕

若要測試您的 Sidekick，請按住 Sidekick 側面的測試按鈕。您將連接到我們的測試中心。



注意

為獲得最佳效果，請每月測試您的Sidekick。

有問題？

CALL (800) 232-1700

緊急情況下

如果您需要協助，請按住求助按鈕，直到您感覺到震動或聽到啟動音。



重點
取消意外
啟動、按下和釋放
出現提示時按下幫助按鈕。



跌倒偵測 (可選功能)

對於啟用跌倒偵測的設備，如果您無法按下幫助按鈕並且偵測到跌倒，設備會向護理專家發送緊急跌倒警報。

為獲得最佳效果，請將求助按鈕佩戴在掛繩上，並置於所有衣物外。

跌倒偵測無法偵測 100% 的跌倒情況。
如果可以，用戶在需要幫助時應始終按下按鈕。

有問題？

CALL (800) 232-1700


關閉/開啟

您的 Sidekick 應隨時保持開啟。


如果您需要**關閉**您的 Sidekick，請同時**按住**測試按鈕和求助按鈕，直到您感覺到震動為止。

設備上的所有燈都應該亮起
一分鐘內關閉。

要重新**打開**您的 Sidekick，您可以同時按下測試按鈕和求助按鈕，或將設備放入充電座中。

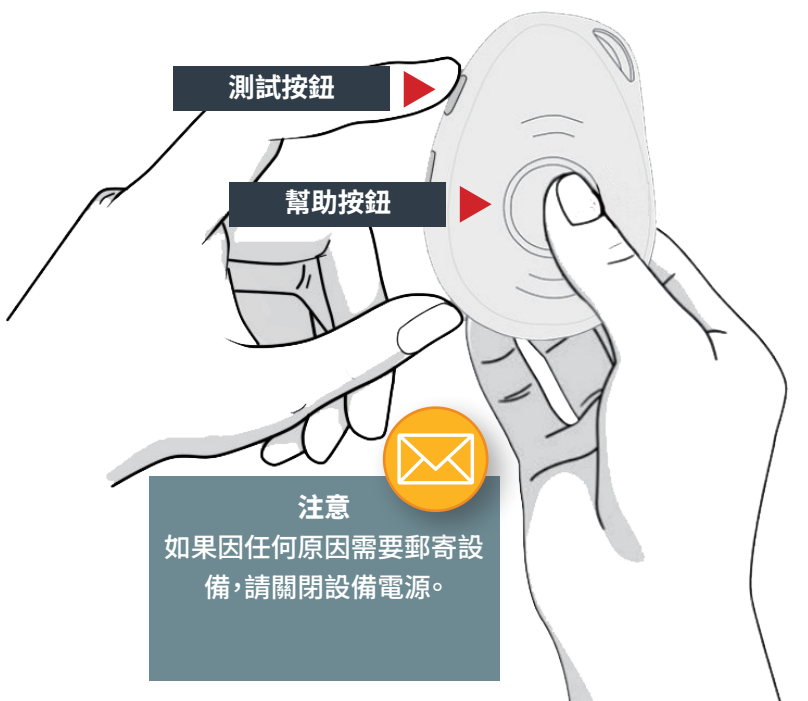

有問題？

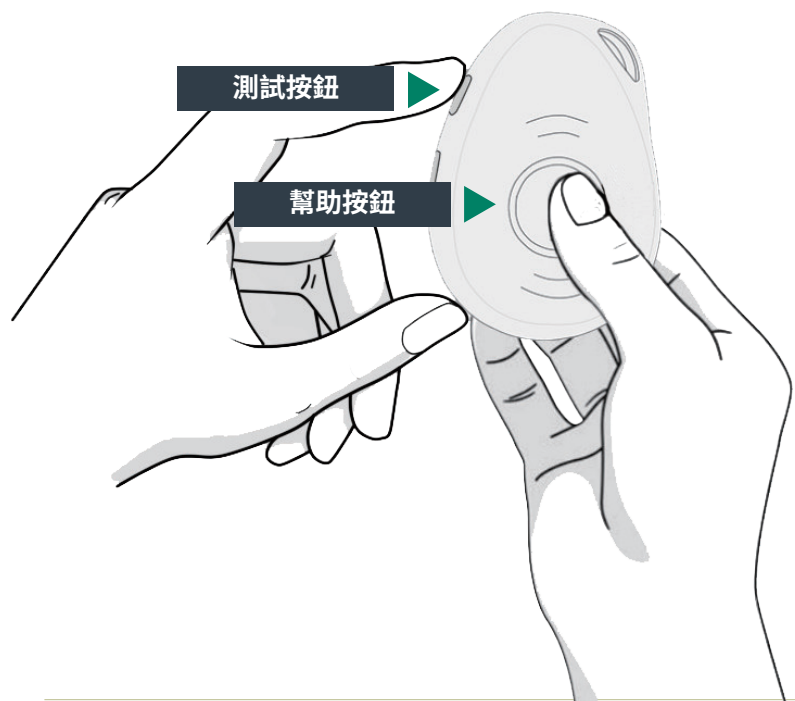

CALL (800) 232-1700

我們隨時為您提供協助。
Call (800) 232-1700
尋求幫助。

該設備依賴蜂窩網路覆蓋範圍才能運作。
在蜂窩網路覆蓋範圍有限的情況下，
您可能會遇到設備功能下降的情況。