

للأسئلة يرجى الاتصال بالرقم التالي (٨٠٠١) ٢٣٢-١٧٠٠

# جهاز SIDEKICK

بدء استخدام جهاز التنبيه الطبي المحمول



## شحن جهازك

لأفضل النتائج، إ شحن جهاز  
كل ليلة Sidekick.



بمجرد استلامك لجهاز Sidekick، قم بتوصيل قاعدة الشحن بمنفذ كهربائي.  
ضع جهاز Sidekick في القاعدة بحيث يكون زر SOS مواجهًا للأمام. تأكد من  
أن جهاز Sidekick مضغوط بإحكام في قاعدة الشحن لبدء عملية الشحن.  
عند الشحن بشكل صحيح، سيتوهج الضوء الأحمر في القاعدة وسينطق جهاز  
Sidekick بعبارة 'يتم الشحن'.

عند اكتمال شحن جهاز Sidekick، سينطفئ الضوء الأحمر في القاعدة.



تأكد من أن الكابل في الجزء الخلفي  
من القاعدة مثبت بإحكام .



يكن ارتداء جهاز  
Sidekick أثناء الاستحمام، ولكن  
لا ينبغي غمره في الماء.



اضغط على زر الوضع  
الصامت مرتين  
لتعطيل/تفعيل التنبيهات الصوتية.



ضوء الحالة  
يومض الضوء باللون الأخضر عندما  
يكون جهاز Sidekick يعمل  
بشكل صحيح.

ضوء الموقع  
يومض الضوء باللون  
الأزرق عندما تكون  
خدمات الموقع متاحة

ضوء التشغيل  
يحتاج جهاز Sidekick إلى  
الشحن عندما يومض ضوء  
التشغيل باللون الأحمر.



زر الاختبار

لاختبار جهاز Sidekick، اضغط  
مع الاستمرار على زر الاختبار  
على جانب الجهاز. سيتم ربطك  
بمركز الاختبار لدينا.



ملاحظة

لأفضل النتائج، ينصح باختبار جهاز  
Sidekick شهرياً.

## في حالة الطوارئ

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، اضغط مع الاستمرار على زر المساعدة حتى تشعر بالاهتزاز أو تسمع نغمات التفعيل.



مهم! إلغاء التفعيل غير المقصود، اضغط على زر المساعدة ثم اتركه عندما يطلب منك.



اكتشاف السقوط (اختياري)

بالنسبة للأجهزة التي تم تفعيل خاصية اكتشاف السقوط بها، إذا لم تتمكن من الضغط على زر المساعدة وتم اكتشاف سقوط، يقوم الجهاز بإرسال تنبيه طارئ للسقوط إلى أخصائي الرعاية للحصول على أفضل النتائج، ارتدِ زر المساعدة الخاص بك مع الحبل المعلق وخارج جميع ملابسك.

لا تكتشف خاصية اكتشاف السقوط جميع حالات السقوط بنسبة 100%. إذا أمكن، يجب على المستخدمين دائمًا الضغط على زر المساعدة عندما يحتاجون إلى المساعدة.


## التشغيل/الإيقاف

يجب إبقاء جهاز Sidekick الخاص بك مُشغلاً دائماً.

اضغط مع الاستمرار على Sidekick إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهاز زري الاختبار والمساعدة معاً حتى تشعر بالاهتزاز.

ستتطفئ جميع الأضواء على الجهاز خلال دقيقة واحدة.

لتشغيل جهاز Sidekick مرة أخرى، يمكنك الضغط على زري الاختبار والمساعدة معاً، أو وضع الجهاز في قاعدة الشحن.

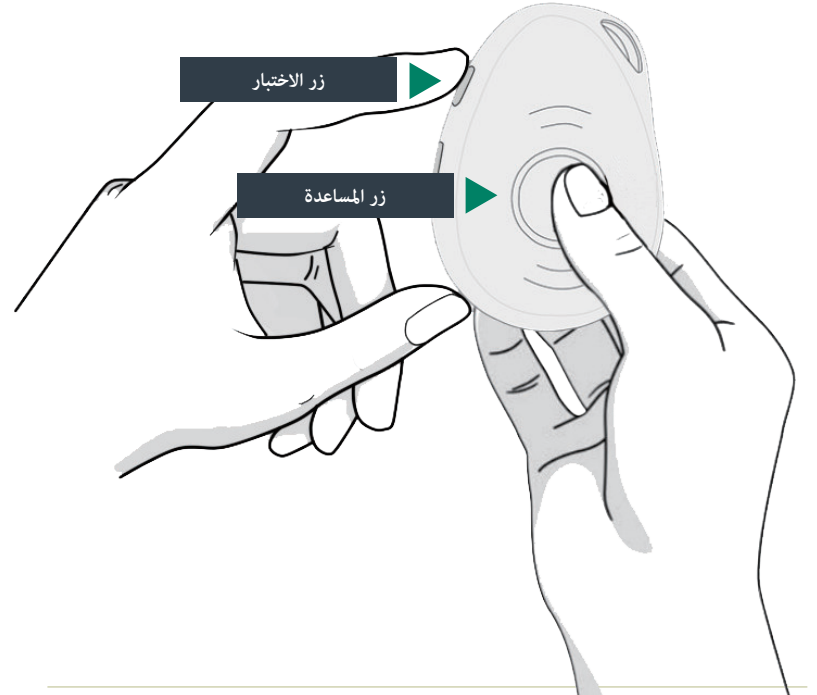

نحن هنا للمساعدة  
اتصل على الرقم التالي (٨٠٠١) ٢٣٢-١٧٠٠  
للمساعدة.

يحتاج هذا الجهاز إلى تغطية شبكة الهاتف المحمول ليعمل.  
في المناطق ذات التغطية المحدودة لشبكة الهاتف المحمول، قد تواجه انخفاضاً في قدرات الجهاز