

QUESTIONS ? VEUILLEZ APPELER LE 1 800 232-1700

SIDEKICKMOBI

COMMENCER AVEC L'ALERTE
DE VOTRE MOBILE MEDICAL



Chargez votre appareil

Pour de meilleurs résultats, veuillez charger votre Sidekick toutes les nuits.



Une fois que vous aurez reçu votre Sidekick, veuillez rentrer son socle de charge dans une prise. Placez le Sidekick dans le socle avec le bouton SOS orienté vers le bas. Assurez-vous que votre Sidekick est fermement enfoncé dans le socle pour lancer la charge. Lorsque la charge est faite correctement, le voyant **ROUGE** du socle s'allumera et le Sidekick dira : « charge en cours. »

Lorsque le Sidekick sera pleinement chargé, le voyant **ROUGE** allumé du socle s'éteindra.



Assurez-vous que le câble qui se trouve à l'arrière du socle est fermement fixé.



QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 232-1700



Le **Sidekick** peut être porté sous la douche. Toutefois, il ne devrait en aucun cas être submergé d'eau.



Appuyez sur le **Bouton silencieux** deux fois pour désactiver/activer les alertes vocales.

Voyants



LE VOYANT DE STATUT
clignote en **VERT**
lorsque le Sidekick
fonctionne correctement.

**LE VOYANT DE
LOCALISATION**
clignote en **BLEU**
lorsque les services
de localisation sont
disponibles.

VOYANT D'ALIMENTATION
Votre Sidekick doit être
chargé lorsque le voyant
d'alimentation clignote
en **ROUGE**.

Tester son appareil



BOUTON TEST

Pour tester votre Sidekick,
appuyez et maintenez
enfoncé le bouton test
qui se trouve sur le côté
du Sidekick. Vous serez
connecté à notre centre
de test.



REMARQUE :

Pour de meilleurs
résultats, veuillez tester
votre **Sidekick** tous
les mois.

QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 232-1700

En cas d'urgence

Si vous avez besoin d'assistance, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'aide jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration ou que vous entendiez les tonalités d'activation.



IMPORTANT

Pour annuler une activation accidentelle, appuyez et relâchez le bouton d'aide lorsque vous y êtes invité.



Détection de chutes (optionnel)

Pour les appareils dont la fonction Détection de chutes a été activée, si vous êtes incapable d'appuyer sur le bouton d'aide et de détecter une chute, l'appareil envoie une alerte d'urgence en cas de chute.

Pour de meilleurs résultats, portez votre bouton d'aide en lanière et sur la partie visible de tous vos vêtements.

La fonction Détection de chutes ne détecte pas les chutes à 100 %. Autant que possible, les utilisateurs doivent toujours appuyer sur leurs boutons s'ils ont besoin d'aide.

QUESTIONS ?



VEUILLEZ APPELER LE 1 800 232-1700

Allumer/Éteindre

Votre Sidekick doit toujours être allumé.
Si vous devez **ÉTEINDRE** votre Sidekick, appuyez et **MAINTENEZ ENFONCÉ** les boutons Test et Aide au même moment jusqu'à ce que vous ressentiez la vibration.

Tous les voyants de l'appareil doivent s'éteindre en une minute.

Pour **RALLUMER** votre Sidekick, vous pouvez appuyer sur les boutons Test et Aide au même moment ou vous pouvez placer l'appareil dans le socle de charge.

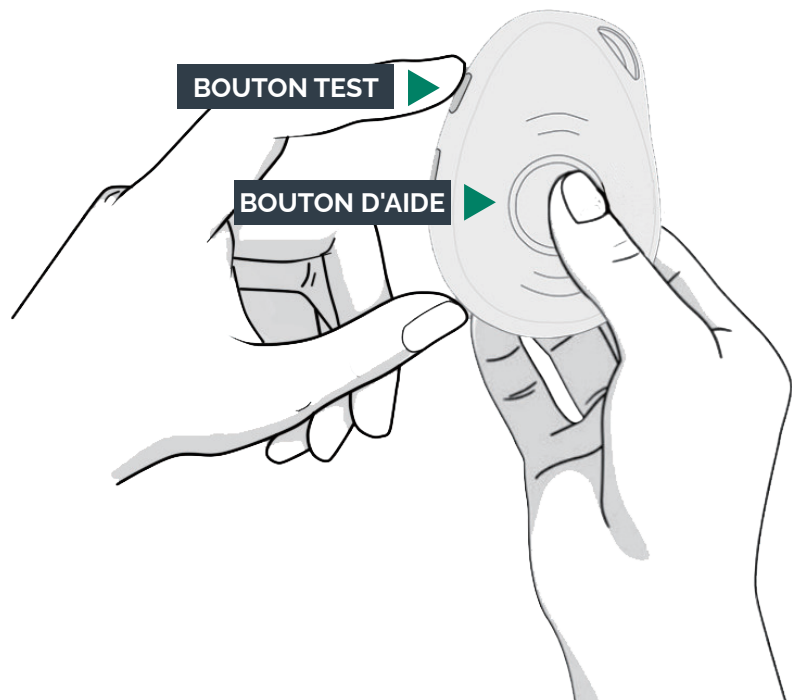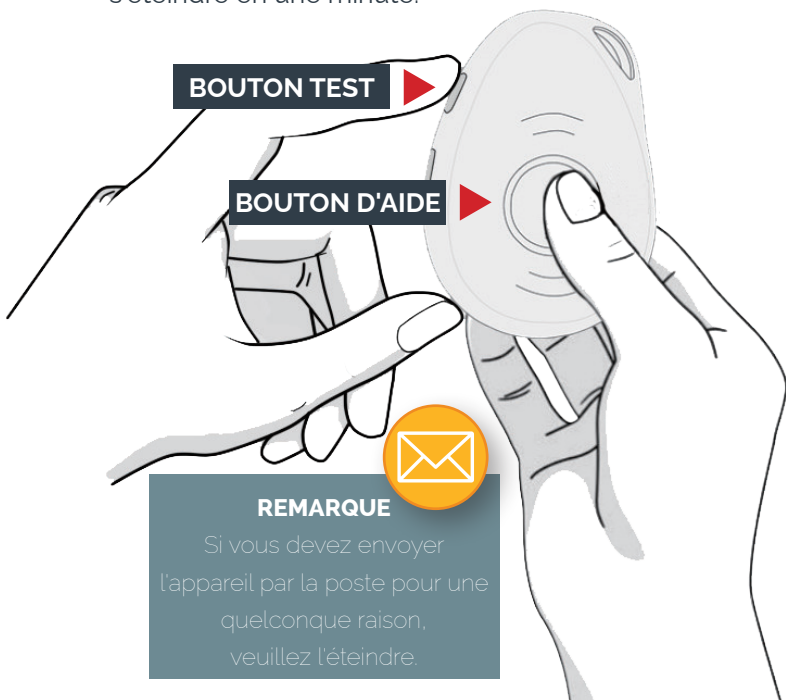

QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 232-1700

**Nous sommes là pour aider.
Veuillez appeler
le (800) 232-1700
pour de l'assistance.**

Cet appareil dépend de la couverture cellulaire pour fonctionner.
Lorsque la couverture cellulaire est limitée, vous pouvez rencontrer des
capacités réduites de l'appareil.