

HAI DOMANDE? CHIAMA IL NUMERO (8 00) 232 - 1700

SIDEKICK

GUIDA INTRODUTTIVA AL TUO DISPOSITIVO
DI ALLERTA MEDICA MOBILE



Ricaricare il tuo dispositivo

Per ottenere risultati ottimali, ricarica il tuo Sidekick ogni sera.



Una volta ricevuto il Sidekick, collega la base di ricarica a una presa di corrente. Posiziona il Sidekick nella base di ricarica con il pulsante di emergenza SOS rivolto in avanti. Per avviare la ricarica, assicurati che il Sidekick sia saldamente inserito nella base di ricarica. Quando si effettua la ricarica correttamente, la luce **ROSSA** sulla base si accenderà e il Sidekick segnalerà lo stato di "ricarica in corso".

Quando il Sidekick è completamente carico, la luce **ROSSA** sulla base di ricarica si spegnerà.



Assicurati che il filo sul retro della base è messo saldamente in posizione.

DOMANDE?

CHIAMA IL NUMERO (8 00) 232 - 1700



EMERGENZA
PULSANTE

MICROFONO



IL **Sidekick** può essere indossato sotto la doccia, ma non va immerso nell'acqua.



PULSANTE DI PROVA

PULSANTE SILENZIOSO



Premere il tasto **Pulsante silenzioso** due volte per disattivare/attivare avvisi vocali.



SPIA DI STATO

La luce lampeggia **VERDE** quando il Sidekick funziona correttamente.

LUCE DI POSIZIONE

La luce lampeggia **BLU** quando sono disponibili i servizi di localizzazione.

SPIA DI ACCENSIONE

Il tuo Sidekick ha bisogno di essere caricato quando la spia di alimentazione lampeggia **ROSSO**.



PULSANTE DI TEST

Per testare il tuo Sidekick, tieni premuto il pulsante di test sul lato del tuo Sidekick. Verrai messo in contatto con il nostro centro di test



NOTA

Per ottenere i migliori risultati, prova il tuo **Sidekick** mensilmente.

In caso di emergenza

Se hai bisogno di assistenza, tieni premuto il pulsante di emergenza finché non senti una vibrazione o i toni di attivazione.



IMPORTANTE

Per annullare un'attivazione accidentale, premi e rilascia il pulsante di emergenza quando richiesto.



Rilevamento delle cadute (opzionale)

Per i dispositivi con rilevamento cadute abilitato, se non riesci a premere il pulsante di emergenza e viene rilevata una caduta, il dispositivo invia un avviso di caduta di emergenza a un addetto all'assistenza.

Per ottenere risultati ottimali, indossa il tuo pulsante di emergenza con il laccio e sopra i tuoi indumenti.

Il rilevatore delle cadute non rileva il 100% delle cadute. Ove possibile, gli utenti dovrebbero sempre premere il pulsante quando hanno bisogno di aiuto.

DOMANDE?


CHIAMA IL NUMERO (8 00) 232 - 1700

Accensione/spengimento


Devi sempre indossare il tuo Sidekick.
Se hai bisogno di **SPENGERE** il tuo Sidekick premi e **TIENI PREMUTO** i pulsanti Test ed Emergenza contemporaneamente fino a sentire una vibrazione.

Tutte le luci sul dispositivo dovrebbero spegnersi entro un minuto.

Per **ACCENDERE** il tuo Sidekick puoi premere contemporaneamente i pulsanti Test e Emergenza oppure posizionare il dispositivo nella base di ricarica.

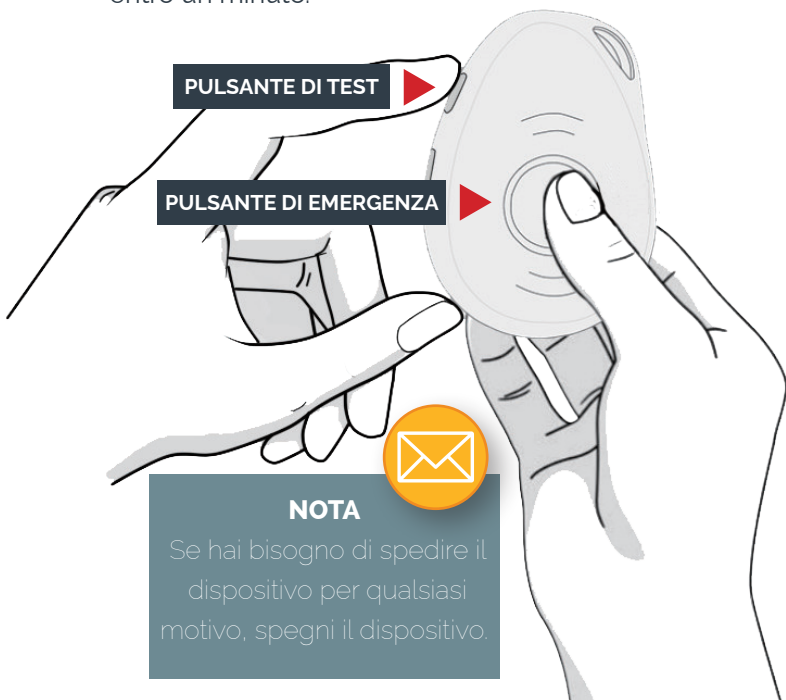

DOMANDE?

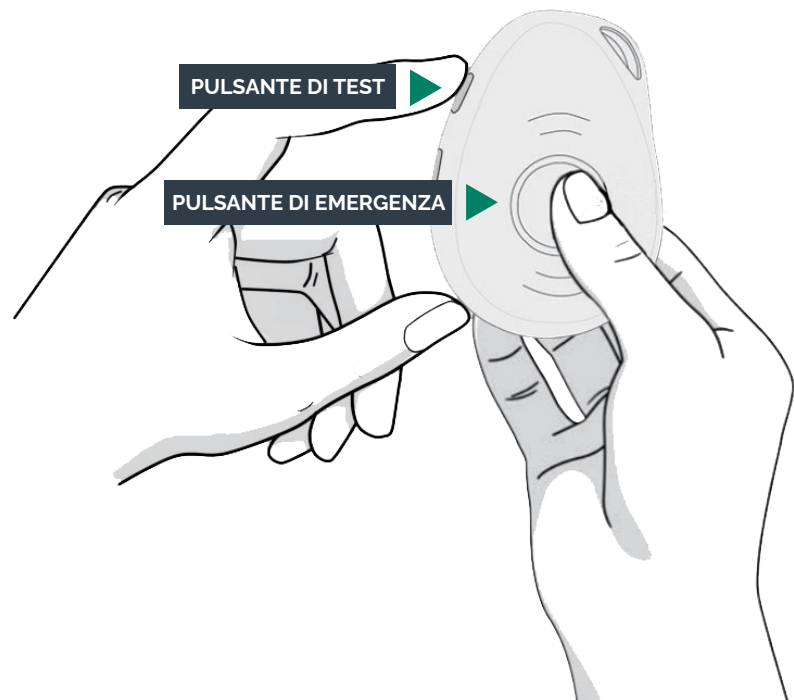

CHIAMA IL NUMERO (8 00) 232 - 1700

**Siamo qui per aiutarti.
Chiama il numero
(800) 232 - 1700
per ricevere assistenza.**

Questo dispositivo necessita di copertura cellulare per funzionare correttamente. Dove la copertura cellulare è limitata, potresti riscontrare una riduzione delle prestazioni del dispositivo.