

有问题吗？致电 (800) 232-1700

# SIDEKICK

开始使用您的移动医疗警报



# 为您的设备充电

为了获得最佳效果,请每晚都给您的Sidekick充电。



收到您的Sidekick后,请将其充电座插入电源插座。将Sidekick放置在充电座上,确保SOS求助按钮朝前。确保将您的Sidekick牢固推入充电座以开始充电。正确充电时,充电座上的**红灯**会亮起,Sidekick会提示“正在充电”。

当Sidekick充满电后,在底座上的**红灯**将会熄灭。



请确保充电座后方的电线已牢固连接到位。

有问题吗?

致电 (800) 232-1700

# 了解你的设备

# 按钮



Sidekick可以在淋浴时佩戴,但不能浸入水中。



按两次静音按钮以停用/启用语音提示。

有问题吗?

致电 (800) 232-1700

# 灯

# 测试您的设备



**状态灯**当Sidekick正常工作时，状态灯会闪烁**绿**灯。

**定位灯**当定位服务可用时，定位灯会闪烁**蓝**灯。

**电源指示灯**  
当电源灯闪烁**红**光时，您的Sidekick需要充电。



**测试按钮**

测试你的 Sidekick, 按住您的 Sidekick 侧面的测试按钮。您将被连接到我们的测试中心。



**注意**  
为了获得最佳效果，  
请每月测试  
你的Sidekick。

有问题吗？

致电 (800) 232-1700

# 在紧急情况下

如果您需要帮助, 请按住求助按钮, 直到您感到震动或听到启动音。



**重要提示**  
要取消意外  
激活, 请在提示时按下并释放求助  
按钮。



**跌倒检测 (可选功能)**  
对于启用了跌倒检测的设备, 如果您  
无法按下求助按钮且检测到跌倒, 设  
备会向护理专员发送紧急跌倒警报。  
为获得最佳效果, 请将求助按钮佩戴在挂绳  
上, 并置于所有衣物外。

跌倒检测不能检测到100%的跌倒。  
如果可以, 用户在需要帮助时应始终按下他们的  
按钮。

有问题吗?

致电 (800) 232-1700

# 关闭/打开


你的 Sidekick 应始终保持开启状态。  
如果您需要**关闭**Sidekick, 请同时**按住**测试按钮和求助按钮, 直到您感到震动为止。

设备上的所有灯应在一分钟内关闭。

要重新**开启**您的Sidekick, 您可以同时按下测试按钮和求助按钮, 或将设备放入充电座中。



有问题吗?

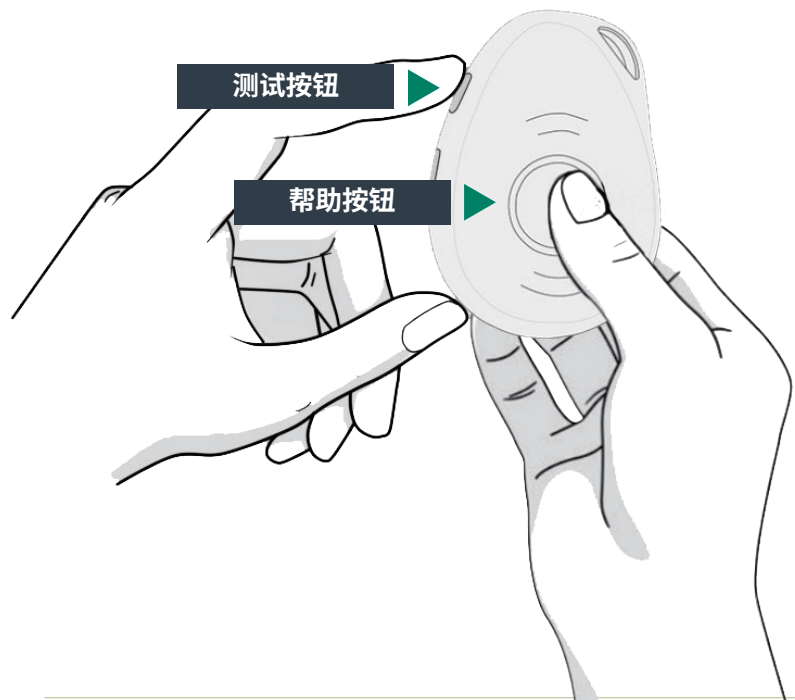

致电 (800) 232-1700

**我们在此为您提供帮助。  
致电 (800) 232-1700  
寻求帮助。**

这个设备依赖蜂窝网络覆盖才能正常工作。  
在蜂窝网络覆盖有限的地区,您可能会遇到设备功能下降的情况。