

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ (800) 998-2400

SIDEKICK SMART

НАЧАЛО РАБОТЫ С
ВАШИМИ МЕДИЦИНСКИМИ СМАРТ-ЧАСАМИ



Краткое руководство пользователя

1. Вставьте зарядной кабель в специальный разъем.



3. Вставьте вилку в электрическую розетку.



2. Вставьте другой конец зарядного кабеля в подставку.



4. Поместите Sidekick Smart в подставку для зарядки. Вы услышите **«Ваши часы заряжаются»**.
5. Проверьте SideKick Smart, нажав и удерживая боковую кнопку, пока услышите **«Кнопка помощи активирована»**. Когда вас спросят, нужна ли вам помощь, скажите: что вы тестируете свое устройство.

Совместите контакты для зарядки на нижней части Sidekick Smart с контактами для зарядки на подставке для зарядки.

Пока прибор будет на подставке для зарядки, на экране будет отображаться процент заряда батареи.



Изучите свой Sidekick Smart

Если экран пустой, нажмите кнопку «Домой» для отображения времени и даты.



Для достижения наилучших результатов заряжайте свой **Sidekick smart** каждую ночь.

В чрезвычайных ситуациях

Если вам нужна помощь, нажмите и **УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку «Домой», пока не услышите "**Кнопка помощи активирована**".



Предупреждение о заряде батареи

Если уровень заряда батареи низкий, вы услышите сообщение о низком уровне заряда батареи, а индикатор уровня заряда батареи загорится красным. Если это произошло, вам следует как можно скорее зарядить устройство.



Уровень заряда батареи

Для достижения наилучших результатов заряжайте свой **Sidekick smar** каждую ночь.



Поиск приложений

При просмотре времени проведите пальцем влево или вправо, для доступа к вашим приложениям.



Домой Кнопка

Открытие приложения

Чтобы использовать приложение, проведите пальцем по экрану, чтобы найти и нажать на значок приложения.

Частота сердечных сокращений

Измерьте частоту своих сердечных сокращений.



Монитор сердечного ритма носит только информационный характер и не предназначен для замены традиционных методов диагностики или лечения.

Шагомер

Отслеживайте свои ежедневные шаги и активность.



Погода

Получите лучший прогноз погоды на сегодня.



Выключить часы

Выключите свой Sidekick Smart.



Чтобы снова включить часы, нажмите и удерживайте кнопку кнопку «Домой».


В целях безопасности мы рекомендуем не выключать часы без необходимости.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ?

ЗВОНИТЕ (800) 998-2400

Безопасный для принятия душа

Sidekick Smart водонепроницаем и его можно носить во время мытья рук, полива растений и принятия душа.

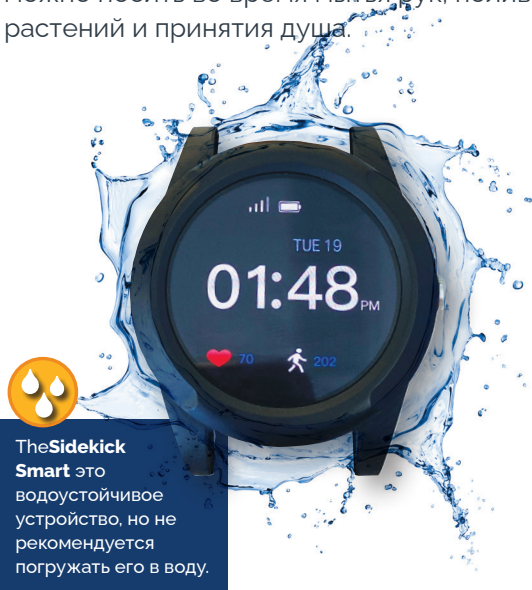

TheSidekick Smart это водостойчивое устройство, но не рекомендуется погружать его в воду.

Часто задаваемые вопросы

Срок службы батареи

В большинстве случаев заряда батареи должно хватить до 3 дней. В среднем потребуется до 3 часов для полной зарядки.

Сотовая связь

SideKick Smart самостоятельно подключается к сотовой сети и не требует сопряжения с телефоном.

При наличии покрытия сети SideKick Smart будет работать во всех 50 штатах США, Пуэрто-Рико и на большинстве территорий США.

Расширенные службы определения местоположения

В случае чрезвычайной ситуации Sidekick Smart использует расширенные данные о местоположении, если они доступны, чтобы помочь нашим специалистам по уходу определить, где вы находитесь.

**Мы всегда рады прийти на помощь.
Звоните (800) 998-2400
для получения помощи.**

Работа этого устройства зависит от покрытия сотовой связи. Если покрытие сотовой связи ограничено, вы можете столкнуться со снижением возможностей устройства.